



## LMインスツルメントの特徴



Siハンドルは比較的力量を必要としない処置に適しています。SiとXSiハンドルを使い分けることで手指への負担を軽減できます。インスツルメント名とコード番号はハンドルに印記されています。オーダー時にはハンドルのタイプをご指定ください。  
Siハンドル= 8.5mm  
XSiハンドル=11.5mm


- 人間工学を考慮したシリコンゴム製  
— 手指にフィットして滑らず操作がしやすい
- 熟練工による器械仕上げ  
— 正しく鋭いカッティングエッジ
- 最適な硬度  
— 感度が高く良好な切れ味と効率性
- 鮮やかなカラーコードと表示  
— 器具の判別がしやすい
- 特殊合金製メタルコア  
— 軽い構造
- 滑らかな研磨面  
— 耐腐食性に優れ  
シャープニングもスムーズ
- しっかりとした取り付け部

- 刃先には高品質なデュラグレードMAXスチール  
— 高い耐摩耗性で切れ味が長持ち

## LM グレーシーキュレット

定番

	グレーシーキュレット	グレーシーリジッドキュレット	グレーシーミニキュレット	グレーシーマクロキュレットAFスタンダード
1/2 LM201-202 Si/XSi	●	●	●	●
3/4 LM203-204 Si/XSi	●	●	●	●
P3/P4 LM266-267 Si/XSi	●	●	●	●
5/6 LM205-206 Si/XSi	●	●	●	●
7/8 LM207-208 Si/XSi	●	●	●	●
9/10 LM209-210 Si/XSi	●	●	●	●
11/12 LM211-212 Si/XSi	●	●	●	●
13/14 LM213-214 Si/XSi	●	●	●	●
15/16 LM245-246 Si/XSi	●	●	●	●
17/18 LM247-248 Si/XSi	●	●	●	●

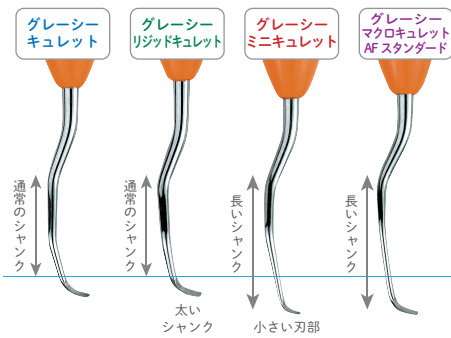

- リジッド**  
通常のタイプよりもシャンクが太く頑強で、刃部は少し幅広い。
- ミニ**  
通常のタイプよりも第一シャンクが3mm長く、刃部が小さい。
- マクロAFスタンダード**  
通常のタイプよりも第一シャンクが3mm長く、刃部が少し幅広い。



15/16, 17/18はシャンクの角度が大きいため臼歯部でハンドルが対合歯に邪魔されることなく患者さんが十分に口を開けない状態でも使用することができます。

## LM シックルスクレーラー

- 刃部がコンパクトでタイトな歯間空隙に使用
- LMミニシックルよりもブレードが短く、第一シャンクが長い
- 全歯面、特に隣接面に使用
- H6-H7よりシャンクの傾斜角度が強く、臼歯部や隣接面にアクセスしやすいシックルスクレーラー
- XSiハンドルのみ

マイクロシックル LM301-302 Si/XSi  
ミニシックル LM311-312 Si/XSi  
シックルLM23 LM313-314 Si/XSi

スクレーラーH6-H7 LM146-147 XSi  
LMラップランダー LM148-149 XSi

## LM シンテット

LMオリジナル

グレーシーキュレットの11と14、12と13を両対で合わせたLMオリジナルのユニバーサルキュレットで、近心・遠心に対応

シンテット LM215-216 XSi  
シンテット ミニ LM215-216M XSi

スクレーラーもエキスカも **簡単・速く・正確** に研げる!

おすすめ!

## LM Rondo Plus シャープナー シルバー

LM ロンドプラスシャープナー シルバー 商品コード: 00234020

**SPECIAL SALE!** キャンペーン期間 2025.3.21~5.20



## LM エキスカベーター

	スプーン	ダブルアングル	トリプルアングル
LM522-523 Si/XSi/1.0mm	●	●	●
LM533-534 Si/XSi/1.5mm	●	●	●
LM61-62 Si/XSi/1.0mm	●	●	●
LM63-64 Si/XSi/1.5mm	●	●	●
LM65-66 Si/XSi/2.0mm	●	●	●
LM611-621 Si/XSi/1.0mm	●	●	●
LM651-661 Si/XSi/2.0mm	●	●	●
LM631-641 Si/XSi/1.5mm	●	●	●
LM671-681 Si/XSi/3.5mm	●	●	●



- ダブルアングルはラウンド状の刃先を持ち、ブレードシャンクは2方向に曲がっています。
- トリプルアングルはブレードシャンクが3方向に曲がっており、側壁やアンダーカットの様なアクセスが難しい部位に適しています。

## LM フレックスプローラー

歯石探知が苦手な方にオススメ!

LM11F-12F XSi

- 歯石、齲蝕の診断や歯周ポケット、修復物、根分岐部の診査に使用
- XSiハンドルのみ

## LM ミラーハンドル

\*ミラー別売

ミラーハンドル LM25 Si/XSi  
エルゴシングルミラーハンドル LM25 ESI

- 色: レッド、ブルー
- ハンドルはSiとXSiの2種類
- 色: レッド、ブルー
- ミラーシャンクの直径: 2.5~2.6mm
- ネジ山は国際標準のM2.5に準拠

## LM ノースカロライナプローブ

LM54B XSi

15mm  
10mm  
5mm  
目盛: 1mm毎

- 1mm刻みの目盛付き片頭プローブ
- XSiハンドルのみ

## LM ペリオプローブ

LM23-52B Si/XSi

目盛: 2mm毎

- 齲蝕用の探針と歯周用の探針を組み合わせたプローブ
- ハンドルはSiとXSiの2種類

## LM ファークーター

根分岐部が苦手な方にオススメ!

LM259-260 XSi

- 根分岐部の天蓋や内面の清掃、特に窪みや溝のある部位に最適なインスツルメント
- XSiハンドルのみ

## LM ユニバーサルキュレット

マッコール13S-14S LM222-223 Si/XSi  
ミニマッコール13S-14S LM222-223M Si/XSi  
コロンビア2L-2R LM217-218 Si/XSi

マッコール #13S-14S  
ミニマッコール #13S-14S

- 頑強なブレードと太いシャンク  
● 主に前歯と小臼歯に使用
- より細く丸みを帯びた刃先 (シックル型ではない)  
● 深く狭窄な歯周ポケットに最適

コロンビア4L-4R LM219-220 Si/XSi  
コロンビア13-14 LM237-238 Si/XSi