

レイスファイルの形状を
そのまま継承！

RACE[®] EVO

レイス エボ

ニッケル チタン ファイル

保険適用品

Ni-Tiロータリーファイル

ヒートトリートメントによって実現した超柔軟性

高い柔軟性を持ち事前に曲げることが出来ます

超柔軟性を**実現**！

周期疲労破折を**軽減**！

切削効率を**アップ**！

滅菌**済み**！



THE
RACE
LEGACY


RACE® EVO レイス エボ

Reamer with
Alternating
Cutting
Edges



形状記憶 ヒート トリートメント ファイル

交互に付いたカッティングエッジをもつ
リーマ型ニッケルチタンファイル

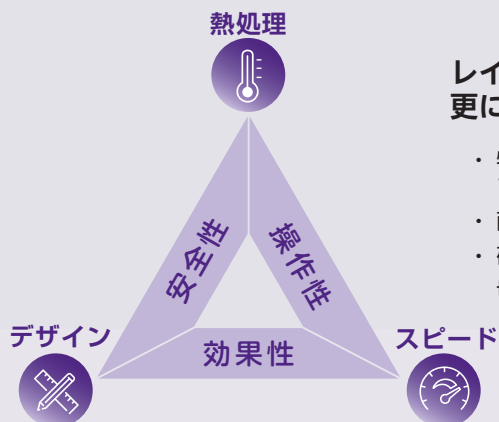

レイス エボは従来のレイスファイルと同じ形状をもち、
更にニッケルチタンの特性を向上させました。

- ・ 特殊な熱処理により、高い柔軟性をもち、
ファイルを事前に曲げることができます。
- ・ 耐疲労性もさらにアップしました。
- ・ 破折リスクが軽減され、より高速回転で使用することができ、
切削効率をアップさせました。

回転数：800～1000
トルク：1.5Ncm

レイス
レイス エボ

+ 40%

より高い柔軟性

x 2.8

繰返し疲労に対する
耐性の向上

+ 50%

切削効率の向上

※従来品比較
(FKG社より提供)


丸く仕上げられた先端部
(Safety tip)



湾曲がきつい根管でも安全に根管壁
に沿って滑らかに移動します。

電解研磨により滑らかで
衛生的な表面性状

電解研磨されたレイスの表面

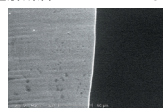

FKG社独自の電解研磨仕上げにより、
表面に凹凸がなく残渣もこびりつかず
清掃や滅菌も効果的に行え、長く使用
できます。

スパイラル&ストレートの
ユニークな刃のデザイン



スパイラル部とストレート部が交互に
デザインされており、噛み込みや目詰
まりが少なく切削片や残渣も効率よく
除去できます。さらに残渣を押し込ま
ず外に出ようデザインされています。

鋭い三角形の断面



刃部の断面が三角形により鋭利で
よく切れ、作業トルクを低く、
回転数を上げることにより破折の
危険性を低減されます。

フレキシビリティ



柔軟性を高めて湾曲根管や細い
根管にも無理なく入っていきます。

レイス エボ 製品ライン

φISO Taper	10	15	20	25	30	35	40	45	50
2	●	●	●		●				
4	●	●	●	●	●	●	●		●
6		●		●	●	●	●		
8				●					

回転数：800～1000
トルク：1.5Ncm




ゴムストッパー色 =ファイルの全長	● 19mm ● 21mm ● 25mm ● 31mm							
ISOサイズ	10	15	20	25	30	35	40	50
テーパサイズ	2%	4%	6%	8%				


レイス エボ おすすめシーケンス

レイス エボは2-3mm幅でストロークさせ、軽く先端に圧をかけながら根管内を前進させていくインスツルメントです。3ストロークした後、根管からインスツルメントを抜き、清掃した後、洗浄してください。#10のハンドファイルも同様の動作を繰り返してください。


最終形成サイズ4%

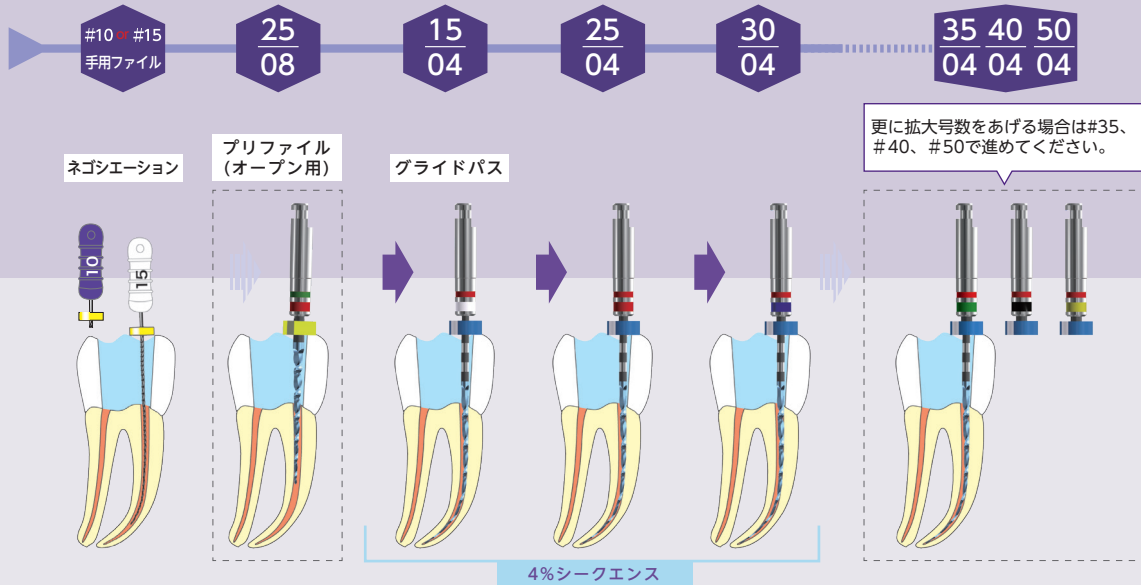

最終形成サイズ6%

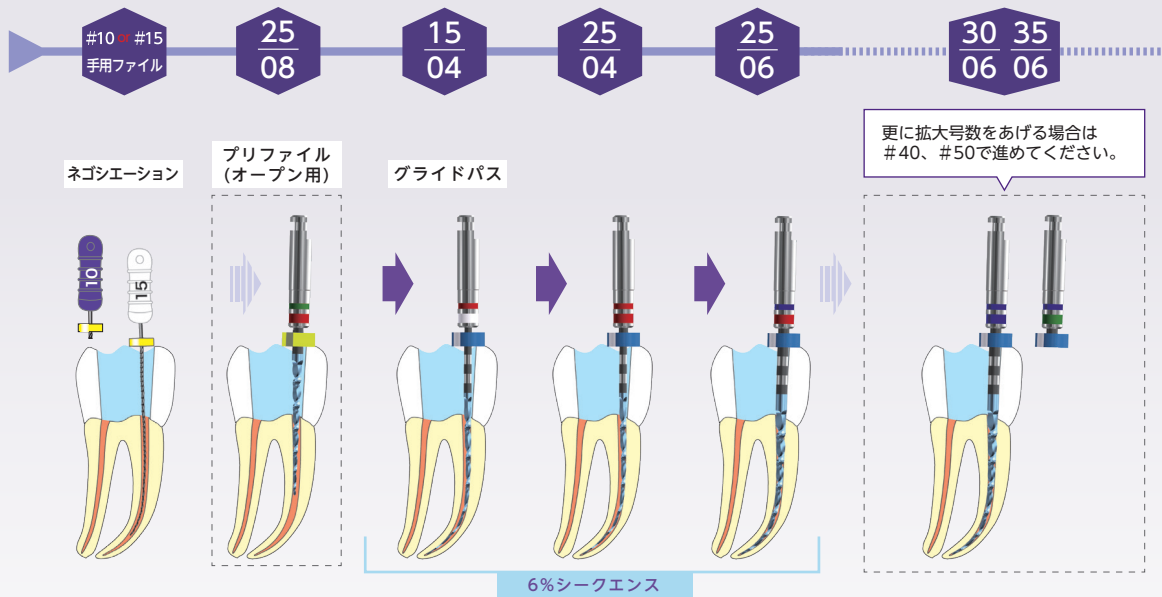

レイス エボを使用した臨床ケース

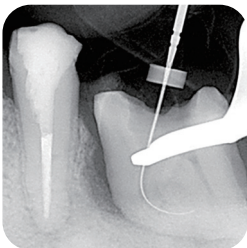

90度を超えるような湾曲では柔軟性の高いファイルを使用しないと形成は難しい。




コールドハイドロリックコンデンセーションにて根管充填

臨床写真提供：ユーズデンタルクリニック院長 牛窪敏博 先生



術中：近心頬側根は大きく湾曲していた

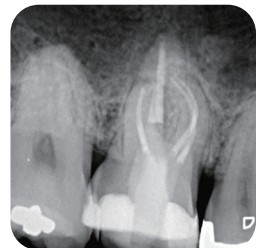


術後：湾曲を逸脱せずに形成でき、充填完了


臨床写真提供：東京都内勤務 渡邊 浩章 先生

レイス エボ 保険適用品

医療機器認証番号 302AKBZX00094000 管理医療機器

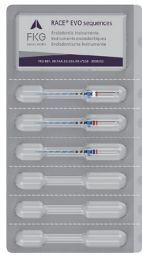

- レイス エボ 4% シークエンスセット(3本)
セット内容 015/.04,025/.04,030/.04
種類 21mm,25mm,31mm
標準価格 **¥5,000**
- レイス エボ 6% シークエンスセット(3本)
セット内容 015/.04,025/.04,025/.06
種類 21mm,25mm,31mm
標準価格 **¥5,000**

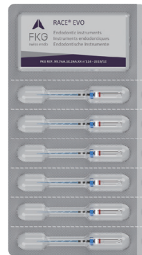

- レイス エボ 8% オープン用ファイル 6本
025
種類:19mm
標準価格 **¥9,900**
- レイス エボ 4% 6本
010,015,020,025,030,035,040,050
種類:21mm,25mm,31mm
標準価格 **¥9,900**
- レイス エボ 2% 6本
010,015,020,030
種類:21mm,25mm,31mm
標準価格 **¥9,900**
- レイス エボ 6% 6本
015,025,030,035,040
種類:21mm,25mm,31mm
標準価格 **¥9,900**

関連商品



小型で軽量!

エンドフリー

歯科用電動ハンドピース

標準価格 **¥89,000** 製造販売業者 東京歯科産業株式会社
管理医療機器(特定保守管理医療機器) 医療機器認証番号:304AIBZX00023000

R-モーション

レスプロケーティング モーション用ファイル

医療機器認証番号 305AKBZX00013000 管理医療機器

保険適用品

- R- モーション グライダー
種類: 21mm/25mm/31mm
#15/.03 標準価格 **¥6,800** [1箱3本入]
- R- モーション グライダー C
種類: 21mm/25mm/31mm
#15/.03 標準価格 **¥6,800** [1箱3本入]
- R- モーション
種類: 21mm/25mm/31mm
#20/.04、#25/.06、#30/.04、
#40/.04、#50/.04
標準価格 **¥6,800** [1箱3本入]

※ #25 のみ、.06 テーパーとなります

XPエンドライズ

根管形成用
ニッケルチタンファイル

医療機器認証番号 304AKBZX00075000 管理医療機器

保険適用品

- XPエンドライズ グライダー
種類:21mm/25mm/31mm
#15/04% 標準価格 **¥9,900** [1箱6本入]
- XPエンドライズ シェーパー
種類:21mm/25mm/31mm
#30/04% 標準価格 **¥11,500** [1箱3本入]
標準価格 **¥22,000** [1箱6本入]

エンド関連器材

RCプレップ

室温ではフォーム状。体温では液状なので、上顎、下顎又根尖にも入りやすく
留まりやすいEDTA材。シリンジタイプとポンプタイプがあります。

premier
プレミア社 (U.S.A.)



根管形成拡大補助材
RCプレップ(ポンプタイプ)



根管形成拡大補助材
RCプレップ(シリンジタイプ)
プレミア社 (U.S.A.)
医療機器認証番号 14800BZY00481000



2.5%次亜塩素酸ナトリウム溶液
ハイポーゲン
プレミア社 (U.S.A.)
医療機器認証番号 14800BZY00481000

フィニッシャー

機械的清掃用
ニッケルチタンファイル

医療機器認証番号 228AKBZX00040000 管理医療機器

保険適用品

- 種類:21mm/25mm/31mm
#25/0% 標準価格 **¥11,500** [1箱3本入]

クリーニング用

フィニッシャーR

機械的清掃用
ニッケルチタンファイル

医療機器認証番号 228AKBZX00040000 管理医療機器

保険適用品

- 種類:21mm/25mm/31mm
#30/0% 標準価格 **¥11,500** [1箱3本入]

クリーニング用

リトリートメント用


レイス エンジン用ニッケルチタンファイル

医療機器認証番号 223AKBZX00075000 管理医療機器

保険適用品



- 種類: 21mm, 25mm, 31mm
.02(2%): #15, #20, #25, #30, #35, #40, #45, #50, #55, #60
.04(4%): #15, #20, #25, #30, #35, #40, #50
.06(6%): #15, #20, #25, #30, #35, #40
標準価格 **¥12,900** [1箱6本入]
- #10(.02/.04/.06)
種類: 21mm, 25mm, 31mm
標準価格 **¥14,400** [1箱6本入]

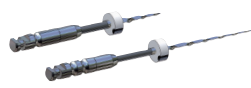

D-レイス 充填材除去用ニッケルチタンファイル

医療機器認証番号 223AKBZX00223000 管理医療機器

- #30/10% 15mm
標準価格 **¥13,000** [1箱6本入]
- #25/4% 25mm
標準価格 **¥13,000** [1箱6本入]
- Dレイス 4本セット
15mm:#30/10%, 25mm:#25/4%
標準価格 **¥9,000** [1箱4本入]

レイス スタンド レイス専用収納スタンド

- エンドスタンド フリースタイル (オレンジ)



標準価格 **¥18,000**

※記載内容は2025年3月現在のものです。尚、記載価格はすべて税別です。



札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市中千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2025.03.P2,000 F21 Ver.1.5.1